

# FemTouch™ de AcuPulse™

FemTouch™ aborda las condiciones relacionadas con la salud vaginal, remodelando el tejido de la mucosa vaginal. El tratamiento consigue contraer, tensar y rehidratar la pared vaginal gracias a la estimulación de las fibras de colágeno mediante el efecto térmico del láser, provocando una neocolagénesis en todo el tejido de la pared vaginal.

Un tratamiento fácil, rápido y cómodo

Rápido


El procedimiento sólo dura unos 5 minutos.

Eficiente

Mínimo número de sesiones requeridas.

Sencillo

No requiere anestesia ni cuidado especial después del procedimiento.

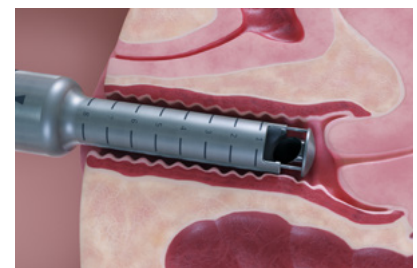

TECNOLOGÍA SUPERPULSE™

RELACIÓN ÓPTIMA ENTRE ABLACIÓN Y COAGULACIÓN

MAYOR PICO DE POTENCIA

ZONA TÉRMICA REDUCIDA Y CONTROLADA

AMPLIA GAMA DE TRATAMIENTOS INTEGRADOS

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA


EQUIPO COMPACTO

## FemTouch™ CO<sub>2</sub> de AcuPulse™

Una nueva solución para tratamiento de las condiciones relacionadas con la salud vaginal como incontinencia o atrofia


**Creado por Lumenis®**, líder mundial en aplicaciones estéticas, quirúrgicas y ginecológicas.

El sistema Acupulse 40AES es el modelo de mayor versatilidad y mejor relación calidad precio del mercado. Ideal para aplicaciones en dermatología, medicina estética, cirugía plástica, ginecología y cirugía maxilofacial, gracias a que mantiene una relación ablación-coagulación excelente por su emisión en el modo Superpulse, con ancho de pulso de 300 microsegundos, reduciendo al máximo las molestias durante el tratamiento y el periodo de recuperación.

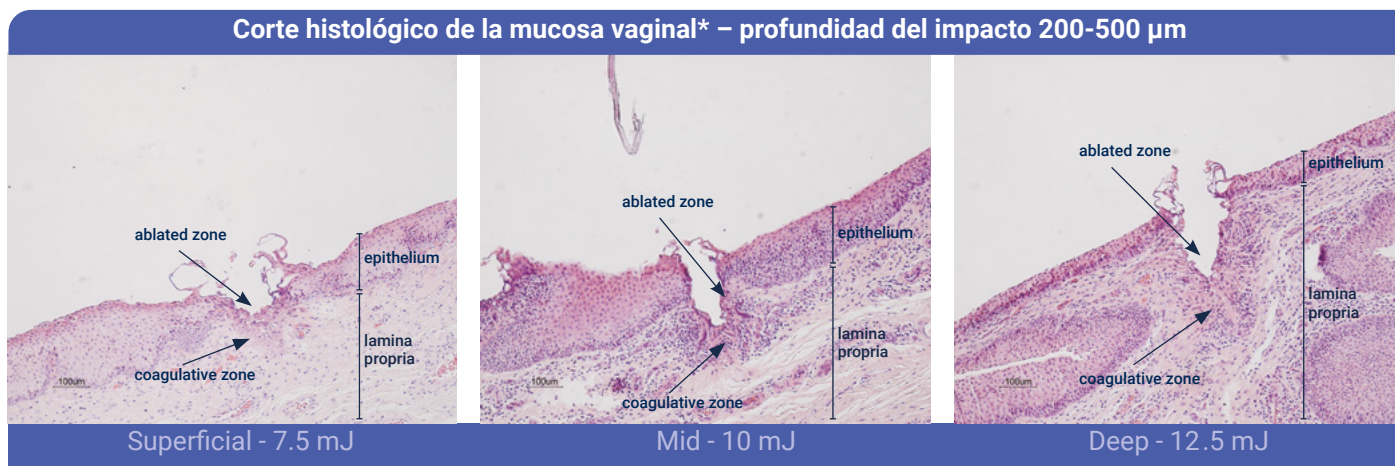

\*porcine ex-vivo model

**Vaginoscopia de la pared posterior - Cortesía Dr. Massimiliano Marziali**

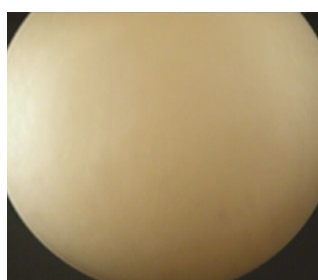

*PRE-TRATAMIENTO*  
Mucosa menos elástica y pálida debido a la disminución de la vascularización



*Inmediatamente DESPUÉS DEL TRATAMIENTO*  
Inflamación ligera y uniforme con vascularización visible

**TIPS FEMTOUCH - DESECHABLES Y REUTILIZABLES**



Los Tips FemTouch de diferentes tamaños y configuraciones proporcionan una total flexibilidad para un tratamiento personalizado garantizando el máximo confort y la satisfacción del paciente

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Láser	CO <sub>2</sub>
Longitud de onda	10,600 nm
Modo de energía	Onda continua (CW)
Emisión del láser	Fraccional
Modo de pulso	Único, Repetido
Energía	7.5-12.5mJ
Densidad	3-25%
Certificación	Lumenis ISO: 13485:2012 FemTouch AcuPulse: CE y FDA